

pierre cardin
PARIS

**DÖNER BAŞLIKLİ
ELEKTRİKLİ
DİŞ FIRÇASI**


PC-T10001



pierre cardin
PARIS



İthalatçı Firma Bilgileri:
Teknokta İç Dış Tic. Ltd. Şti.
Adres: Küçükbakkalköy Mh. Kayışdağı Cd. Ayşe Hatun Çeşme Sk.
No:9 Kat:-1,0,1,2 PK: 34775 Ataşehir / İstanbul
Telefon: +90 216 600 20 00 | Fax: +90 216 576 38 78

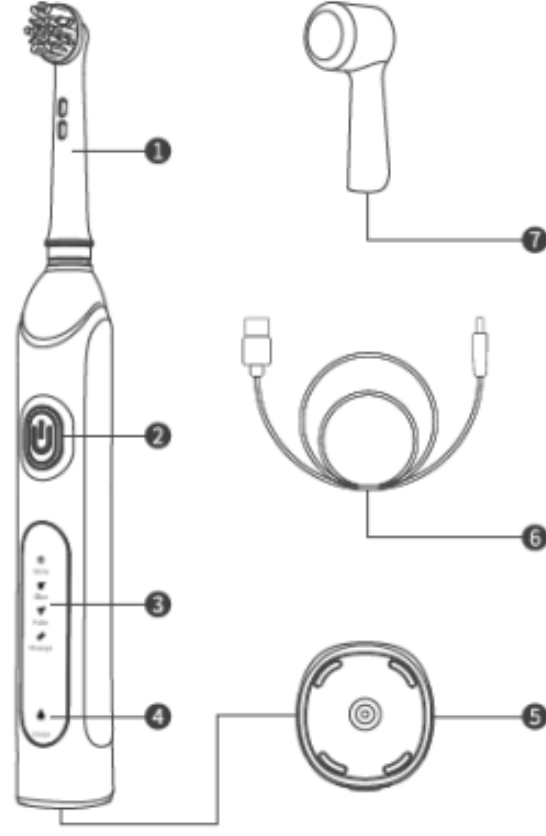

- 1.Diş Fırçası Başlığı
- 2.Açma/Kapama ve Mod seçim düğmesi
- 3.Mod göstergesi
- 4.Şarj göstergesi
- 5.Şarj soketi
- 6.USB şarj kablosu
- 7.Koruyucu kapak

Girdi	DC5V - 1.2W
Şarj süresi	Yaklaşık 4 saat
Boyutlar	230x26x28mm
Ağırlık	105 g

KULLANIMDAN ÖNCE

Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

ÖNEMLER

Şarj cihazını sudan uzak tutun. Cihazı küvet, lavabo, eviye vb. içinde bulunan suyun üzerine veya yakınına yerleştirmeyin veya buralarda saklamayın. Şarj cihazını suya veya başka bir sıvıya daldırmayın. Cihazı temizledikten sonra, prize takmadan önce şarj cihazının tamamen kuru olduğundan emin olun.

UYARI


1. Bu cihaz, gözetim altında olmaları ve cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasına yönelik talimatları almış ve söz konusu tehlikeleri anlamış olmaları kaydıyla, çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kabiliyeti kısıtlı olan ya da yeterli deneyim ve bilgi sahibi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
2. Çocukların cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmaları gerekir. Temizlik ve bakım işlemleri, gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılamaz.
3. Şarj cihazını dış mekanda veya sıcak yüzeylerin yakınında kullanmayın.
4. Diş fırçası başlığını, diş fırçası sapını veya şarj cihazını bulaşık makinesinde temizlemeyin.
5. Bu ürün sadece dişleri, diş etlerini ve dili temizlemek için tasarlanmıştır. Başka amaçlar için kullanmayın. Herhangi bir rahatsızlık veya ağrı hissederseniz cihazı kullanmayı bırakın ve destek almak için doktorunuza danışın.
6. Diş fırçası başlığının kılını ezilmiş veya bükülmüş ise, başlığı kullanmayı bırakın. Diş fırçası başlığını her 3 ayda bir veya aşınma belirtileri görülürse daha kısa aralıklarla değiştirin.
7. Kullandığınız diş macunu peroksit, sodyum bikarbonat veya başka bir bikarbonat (beyazlatıcı diş macunlarında yaygın olarak kullanılan bir bileşendir) içeriyorsa, her kullanımdan sonra diş fırçası başlığını sabun ve suyla iyice yıkadığınızdan emin olun. Bu, plastik parçalardaki olası çatlamaları önler.
8. Son 2 ay içinde ağzı veya diş eti ameliyatı geçirdiyseniz, bu cihazı kullanmadan önce diş hekiminize danışın.

ŞARJ TALİMATLARI

1. Batarya zayıfsa, şarj göstergesi kullanıcıya batarya seviyesinin düşük olduğunu ve bataryanın şarj edilmesi gerektiğini hatırlatmak için 10 kez yanıp sönecektir.
2. Cihazı DC şarj portuna bağlayın. USB kablosunu herhangi bir uygun güç kaynağına bağlayın. Şarj göstergesi kırmızı renkte yandığında şarj işlemi başlar (tam şarj yaklaşık 4 saatte tamamlanabilir). Cihaz tamamen şarj olduğunda, aşırı şarjı önlemek için cihaz otomatik olarak kapanacak ve şarj göstergesi hatırlatma amacıyla yeşil renge dönecektir.
3. Cihaz ilk kez kullanılıyorsa veya uzun süre kullanılmadıysa, şarj başlamadan önce 5 dakika boyunca gösterge yanmayabilir. Bu durum, batarya şarj seviyesinin düşük olmasından kaynaklanmaktadır ve normaldir.


Kullanım Kılavuzu

1. Diş fırçası başlığını yerleştirin;

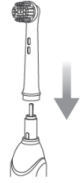

2. Diş macununu diş fırçasına sürün. Sıçramayı önlemek için, cihazı açmadan önce fırça başlığını dişlerinize doğru yönlendirin;
3. Açma/kapama düğmesine basın. İstenen modu seçmek için 3 saniye içinde düğmeye tekrar basın:
- ☆ Beyaz Mod:
Temizlik modundan daha güçlüdür. Dişlerdeki plağa darbe uygulayarak, diş yüzeyindeki tartarın sökülüp atılmasını sağlar. Dişteki plağı 5 kat daha iyi temizler.
- ♥ Temizlik Modu:
Plak tabakasını hızla inceltir ve ağızdaki bakterilerin çoğalmasını azaltır. (Gündelik fırçalama için önerilir)
- ♥ Parlaklık Modu:
Diş parlaklığını artırır ve lekelerin giderilmesine yardımcı olur.
- ♣ Masaj Modu:
Diş eti sağlığını iyileştirmek amacıyla diş etlerinizi nazikçe uyarır ve masaj yapar.

4. Diş fırçası başlığını yavaşça dişler arasında gezdirin ve her diş yüzeyinde birkaç saniye tutun. Önce diş kısımları fırçalayarak başlayın, akabinde iç kısımları ve son olarak da çiğneme yüzeylerini fırçalayın. Ağzınızın dört bölümünden her birini eşit şekilde fırçalayın (bunu size hatırlatmak için, cihaz 30 saniyelik aralıklarla kısa süreliğine durur). Sizin için doğru diş fırçalama tekniği konusunda diş hekiminize veya diş hijyenistinize de danışabilirsiniz.

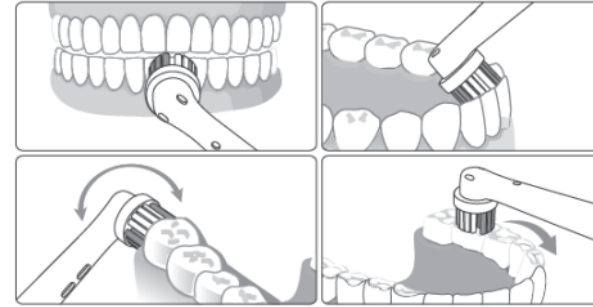


30 saniye
30 saniye
30 saniye
30 saniye

Cihaz, size hatırlatma yapmak için 30 saniyelik aralıklarla kısa süreliğine durur.

TEMİZLİK

1. Diş fırçası başlığını hafif akan su altında durulayın ve fazla suyu temizlemek için sallayın. Ayrıca diş fırçası başlığını cihazdan ayırabilir, fırça başlığının tamamını su ile durulayabilir, diş fırçasının boyun ve sap kısmını yıkayabilirsiniz.

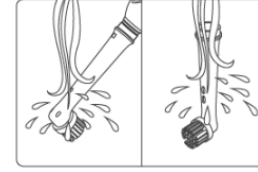

2. Bulaşık makinesinde temizlemeyin.



ÜRÜNÜN DOĞRU ŞEKİLDE BERTARAF EDİLMESİ

- (Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar)
Ürün üzerinde veya ürün kitapçığında yer alan bu işaret, ürünün kullanım ömrü sonunda diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.

Kontrolsüz atık bertarafının çevre veya insan sağlığı üzerindeki olası zararlarını önlemek için, lütfen bu cihazı diğer tip atıklardan ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir yeniden kullanımını teşvik etmek için, bilinçli bir şekilde geri dönüştürün.
Ev kullanıcıları, bu ürünü çevre açısından güvenli geri dönüşümü için nereye ve nasıl götürülebileceklerine dair bilgi almak üzere bu ürünü satın aldıkları perakendeciye veya yerel makama başvurmalıdır. Ticari kullanıcılar tedarikçileriyle iletişime geçmeli ve satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarını kontrol etmelidir. Bu ürün diğer ticari atıklarla birlikte bertaraf edilmemelidir.